

The logo features a large '71' in green and red, followed by 'TT Med' in blue with a registered trademark symbol.

71 TT Med®



Made in Italy

**Poltrona per uso
ginecologico / urologico.**

**Chair for
gynecological / urological use.**



TT Med® è un'azienda produttrice di poltrone specialistiche medicali. Nasce dal grande dinamismo dei soci nello sviluppare soluzioni innovative unite dalla grande passione per questo settore.

Lo staff aziendale, di elevato profilo professionale, è al completo servizio del cliente offrendo professionalità, flessibilità e affidabilità: la soddisfazione del cliente è al centro della nostra mission.

L'utilizzo di materiali di elevata qualità, la cura dei dettagli con uno stile italiano ricercato e una filiera produttiva 100% made in Italy, garantiscono prodotti di qualità eccellente: il sistema qualità aziendale è conforme agli standard ISO 9001 e ISO 13485.

TT Med® is a manufacturer of medical specialist chairs. Born from the great dynamism of the partners in developing innovative solutions combined with a great passion for this sector.

The company staff, of high professional profile, is at the complete service of the customer by offering professionalism, flexibility and reliability: customer satisfaction is at the center of our mission.

The use of high quality materials, attention to detail with a refined Italian style and a 100% made in Italy production chain, guarantee excellent quality products: the company quality system complies with ISO 9001 and ISO 13485 standards.

FRANCY NEW

Poltrona ginecologica/urologica - Gynaecological/urological chair

Dal design elegante e confortevole con un'ampia selezione di colori per una configurazione personalizzata.

Regolazioni silenziose e fluide delle movimentazioni della sedia.

Poltrona dotata di 4 motori elettrici a bassa tensione (24V-DC): movimentazioni elettriche e indipendenti: sollevamento, schienale, trendelenburg e poggiatesta / braccioli. Il telaio è realizzato con l'utilizzo d'acciaio di alta qualità, verniciato a polvere colore grigio chiaro con caratteristiche antimicrobiche.

La tappezzeria è realizzata con tessuto sky con proprietà antibatteriche, antimicotiche, ignifugo, disinfettabile e altamente resistente all'abrasione.

Il basamento è dotato di kit 4 ruote con un dispositivo di arresto a pedale per garantire un facile spostamento della poltrona e per permettere di sanificare l'ambiente di lavoro con estrema facilità.

La poltrona presenta un'altezza minima della seduta dal pavimento (510 mm) per consentire un comodo accesso ed evitare l'uso dello sgabello. Elevata capacità di carico: max 230 kg.

Dotazione standard: vaschetta porta liquidi in acciaio inox completa di supporto dotato di braccio articolato e coppia barre laterali porta accessori montate sulla seduta.



Elegant and comfortable design with a numerous selection of colors for a personalized configuration. Silent and flowing adjustments to the movements of the chair.

Chair equipped with 4 electric motors at low voltage (24V-DC). Electric and independent movements: lifting, backrest, trendelenburg and footrest / armrests.

The frame is made with the use of high quality steel, powder coated in light gray with antimicrobial characteristics. The upholstery is made of sky fabric with antibacterial, antifungal, fireproof, disinfectable and highly resistant to abrasion.

The base is equipped with 4 wheels with a pedal stop device to ensure easy movement of the chair and to allow the work environment to be sanitized with ease.

The chair has a minimum height of the seat from the floor to allow easy access and avoid the use of the stool. High load capacity: max 230 kg. Standard equipment: liquid collection bowl in stainless steel complete of support with articulated arm and pair of side bars for accessories mounted on the seat.

Ricerca del massimo comfort per il paziente: poggiatesta e braccioli regolabili elettricamente e altezza minima per consentire un comodo accesso alla sedia senza l'utilizzo del predellino anche per pazienti anziani e con protesi all'anca.

Dotata di movimentazione di trendelenburg (-21°) e reverse trendelenburg (4°) gestite elettricamente.

Con l'aggiunta dell'accessorio gambale estraibile (imbottito con sky), è possibile trasformare la poltrona in un comodo lettino in posizione orizzontale per consentire l'esecuzione dell'ecografia.



It ensures maximum comfort for the patient: electrically adjustable footrests/armrests and minimum height to allow easy access to the chair without using the step stool even for elderly patients and those who have prosthetics to the hips.

Equipped with trendelenburg (-21 °) and reverse trendelenburg (4°) movements managed electrically.

With the addition of the removable leg rest accessory (upholstered with sky), it is possible to transform the chair into a comfortable bed in a horizontal position to allow the execution of the ultrasound scan.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Tensione di alimentazione

Tension/Frequency

230V-50Hz

Motori bassa tensione

Low-voltage motors

24 V-DC

Capacità di sollevamento max

Lifting capacity max

230 Kg

Grado di protezione

Degree of protection

IP54

Peso della poltrona

Chair weight

135 kg

Altezza max della seduta (da terra)

Seat max height (from the ground)

960 mm

Altezza min della seduta (da terra)




Seat min height (from the ground)

510 mm



Trendelenburg : -21°

Reverse Trendelenburg: 4°

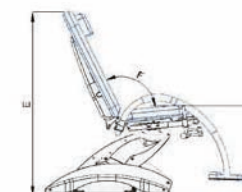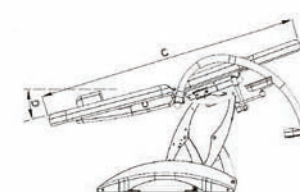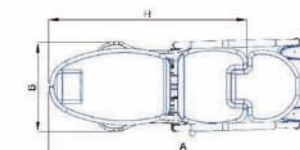

A.	1870 mm
B.	700 mm
C.	1800 mm
D.	21° mm
E.	1300 ÷ 1685 mm
F.	118° ÷ 180°
G.	510 ÷ 960 mm
H.	1420 mm

ACCESSORI_OPTIONALS

**12900017**

Porta carta mono uso
Paper roll holder

**12900018**

Porta vassoio completo di vassoio
applicabile allo schienale
Tray support with tray

**12000012**

Astaportaflebo 2 ganci
I.V. Stand with 2 hooks

**12500005/A:**

Supporti reggicosce in poliuretano integrale
Pair of padded thigh-holders in Polyurethane foam

12500005/B:

Supporti reggicosce in poliuretano integrale rivestiti in sky
Pair of padded thigh-holders in Polyurethane foam
upholstered with sky.

Entrambe le versioni sono regolabili e dotate di giunto snodato con
dispositivo di blocco movimenti
Both versions are adjustable and provided with a jointed support
that allows the block of the movements.

12500007

Poggiatesta ad altezza regolabile
Adjustable height head rest

**12500009**

Batteria emergenza
Battery box

**60000001**

Supporto colposcopio solidale con la seduta della poltrona
Colposcopic support integrated to chair seat

**12900011:**

Gambale estraibile rivestito in sky per ecografia
Removable Leg rest for ultrasound scan



Dotazione standard/Standard equipment

Funzione Memory Position:**permette la memorizzazione di 4 posizioni**

- 2 preimpostate dalla casa: CPR e posizione iniziale di visita (gestite da comando a pulsantiera)
- 2 posizioni di trattamento programmabili autonomamente dal medico (gestite da comando a pedale con tecnologia wireless)
Gestione movimentazioni elettriche tramite comando a pulsantiera e comando a pedale con tecnologia wireless.

**Memory Position Function:****it allows the memorization of 4 positions**

- 2 positions are preset by the firm: CPR and the initial position of the medical examination (they are managed by a push-button control)
- 2 positions are set freely by the doctor (a foot switch with wireless technology manages them)
The management of the electrical movements is organized through a foot switch with wireless technology

FRANCY

Poltrona ginecologica/urologica - Gynaecological/urological chair

Poltrona per uso ginecologico e urologico. Prodotto altamente performante in termini di funzionalità e comfort con prestazioni ai vertici della categoria unite ad un design moderno ed elegante. Struttura in acciaio completamente verniciato con polvere epossidica con caratteristiche antimicrobiche.

Capacità di carico molto elevata: 230 kg.

E' corredata di vaschetta porta liquidi in acciaio inox montata su un braccio articolato. Sedile, schienale e poggiamambe sono rivestiti in sky ignifugo classe 1 IM, antibatterico, antimicotico, disinfettabile e resistente all'usura. Kit di equipaggiamento standard di 4 ruote con freno a pedale. I comandi elettrici sono gestiti da una pulsantiera e solo il comando di sollevamento può essere controllato anche tramite comando a pedale.

Chair for gynecological and urological use. The product is highly performing in terms of functionality and comfort with top class performance combined with a modern and elegant design. Completely painted steel structure with epoxy powder with antimicrobial characteristics. Very high load capacity: 230 kg. It is equipped with an external stainless steel liquid bowl mounted on an articulated support. Seat, back and leg-rest are upholstered in sky fireproof class 1 IM, antibacterial, antimycotic, disinfected and wear resistance. Standard equipment kit for 4 transport wheels with foot brake. The electric controls are managed by a push-button panel and only the lifting command can be controlled by foot control.



Movimenti elettrici di bassa tensione (disponibile in due versioni: 3 o 4 attuatori lineari 24V-DC): sollevamento elettrico, angolo schienale 180° elettrico, gambale elettrico, trendelenburg elettrico (disponibile solo modello Francy 4). Braccioli in poliuretano sincronizzati con lo schienale e regolabili in rotazione. Supporto porta coscia in poliuretano espanso regolabile e articolato su supporto cromato con forma ergonomica.

Electrical low voltage movements (available in two versions: 3 or 4 linear actuators 24V-DC): electric lifting, backrest angle 180° electric, electric leg rest, electric trendelenburg (available only Francy 4 model). Polyurethane armrests synchronized with backrest and adjustable in rotation. Thigh-holder support adjustable polyurethane foam and articulated on chromed support with ergonomic shape.



COMFORT



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Tensione di alimentazione
Tension/Frequency
230V-50Hz

Motori bassa tensione
Low-voltage motors
24 V-DC

Capacità di sollevamento
Lifting capacity
230 Kg

Grado di protezione
Degree protection
IP54

Peso della poltrona
Chair weight
131 kg

Altezza max della seduta (da terra)
Seat max height (from the ground)
910 mm




Altezza min della seduta (da terra)
Seat min height (from the ground)
510 mm



Trendelenburg : -15°
(disponibili solo sulla versione a 4 motori elettrici)
Trendelenburg: -15°
(available only on the version with 4 electric motors)



A.	510 mm
B.	1350 mm
C.	1200 mm
D.	910 mm
E.	1880 mm
F.	-15°
G.	835 mm
H.	560 mm
(profondità seduta 480mm)	
I.	0° / 90°
J.	5° / 90°

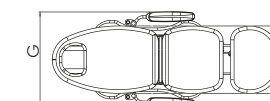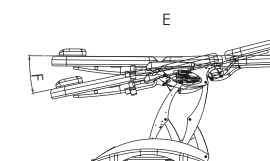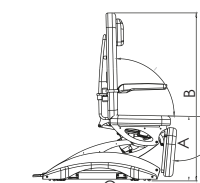

ACCESSORI_OPTIONALS

**12900017**Porta carta mono uso
Paper roll holder**12900018**Porta vassoio completo di vassoio
applicabile allo schienale
Tray support with tray**12000012**Astaportaflebo 2 ganci
I.V. Stand with 2 hooks – Drip holder
stand**40900001-50**Reggitalloni telescopici modello RING
Telescopic heel rest model RING**12500005**Supporti reggi cosce snodabili con
blocco movimenti
Thigh holder support with joint with
locking device**12900023**Barra porta accessori per schienale
Accessory mounting bar for back**12500006**Coppia cosciali imbottiti
Pair of padded thigh-holders**12500007**Poggiatesta ad altezza regolabile
Adjustable height head rest**12500008**Pedaliera per UP/DOWN
Foot switch for UP/DOWN**12500009**Batteria emergenza
Battery box**60000001**Supporto colposcopio solidale con
la seduta della poltrona
Colposcopic support integrated to chair seat

12500010

Funzione Memory Position:**permette la memorizzazione di 4 posizioni**

- 2 preimpostate dalla casa: CPR e posizione iniziale di visita (gestite da comando a pulsantiera)
- 2 posizioni di trattamento programmabili autonomamente dal medico (gestite da comando a pedale con tecnologia wireless)
Gestione movimentazioni elettriche tramite comando a pulsantiera e comando a pedale con tecnologia wireless.

**Memory Position Function:****it allows the memorization of 4 positions**

- 2 positions are preset by the firm: CPR and the initial position of the medical examination (they are managed by a push-button control)
- 2 positions are set freely by the doctor (a foot switch with wireless technology manages them)
The management of the electrical movements is organized through a foot switch with wireless technology

ELLY

Poltrona ginecologica/urologica - Gynaecological/urological chair

ELLY è una poltrona per uso ginecologico/urologico. Poltrona dal design compatto e moderno che risponde alle esigenze di professionisti che sono alla ricerca di strumenti innovativi, pratici e funzionali nonché a quelle dei pazienti che desiderano agio, comodità e relax in una situazione di momentaneo impaccio. Molto adatta per l'utilizzo in ambienti con spazio limitato. **Elly** è disponibile in quattro versioni: 1,2,3,4 motori con movimentazione indipendente di sollevamento, schienale, gambale e trendelenburg (il trendelenburg non è disponibile nella versione ad 1 motore elettrico).

Struttura in acciaio di alta qualità completamente verniciato con polvere epossidica con caratteristiche antimicrobiche. I comandi elettrici sono gestiti da una pulsantiera e solo il comando di sollevamento è controllato anche tramite comando a pedale (sulla versione a 1 motore elettrico è presente solamente il comando a pedale). La dotazione standard comprende vaschetta di raccolta liquidi in acciaio inox, pedaliera di comando per la gestione del sollevamento elettrico e comando a pulsantiera per le versioni 2/3/4 motori. Il basamento è disponibile sia fisso che su ruote (2 con freno e due libere) per permettere lo spostamento della poltrona e l'igienizzazione dell'ambiente di lavoro con la massima comodità.

ELLY is a chair for gynecological/urological use. Chair with a compact and modern design that meets the needs of professionals who are looking for innovative, practical and functional tools as well as those of patients who want comfort and relaxation in a situation of temporary embarrassment. Very suitable for use in environments with limited space. **Elly** is available in four versions: 1,2,3,4 motors with independent lifting, back, leg and trendelenburg movements (trendelenburg is not available in the version with 1 electric motor). Structure in high quality steel completely painted with epoxy powder with antimicrobial characteristics. The electric controls are managed by a push-button panel and only the lifting command is controlled also by foot control (on the version with 1 electric motor there is only the foot control).

The standard equipment includes a stainless steel liquid collection bowl, pedal control for the electric lifting management and control panel for versions 2,3,4 engines. The base is available both fixed and on wheels (2 with brake and two free) to allow the movement of the chair and in order to perform with the utmost comfort the sanitation of the work environment.

PEDALIERA
PEDAL KEYBOARD

Movimentazioni con motore elettrici in bassa tensione (attuatori lineari 24V-DC) e con pompa a gas: il sollevamento è in tutte le versioni elettrico mentre le altre movimentazioni è possibile gestirle anche con molla a gas bloccabile nella posizione necessaria azionata manualmente. Supporto porta coscia in poliuretano integrale a doppia regolazione su supporto cromato con forma ergonomica. Braccioli rotabili ed amovibili, seduta, schienale e gambale sono rivestiti in sky ignifugo classe 1 IM, antibatterico, antimicotico, disinfettabile e resistente all'usura. La funzione trendelenburg è disponibile su tutte le versioni ad eccezione della versione a 1 motore elettrico.

Numerosi gli accessori disponibili per incrementare la funzionalità del prodotto (vedi lista accessori).



Movements with electric motor in low voltage (linear actuators 24V-DC) and with gas pump: the lifting is in all versions electrically managed while the other movements can be managed even with gas spring lockable in the necessary position manually operated. Thigh support in polyurethane foam with double adjustment on chromed support with ergonomic shape. Rotatable and removable armrests, seat, back and leg are upholstered in class 1IM fireproof sky, antibacterial, antifungal, disinfectable and resistant to wear.

The trendelenburg function is available on all versions except for the version with 1 electric motor.

Numerous accessories are available to increase the functionality of the product (see accessories list).

COMFORT



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Tensione di alimentazione

Tension/Frequency

230V-50Hz

Motori bassa tensione

Low-voltage motors

24 V-DC

Capacità di sollevamento

Lifting capacity

180 Kg

Grado di protezione

Degree protection

IP54

Peso della poltrona

Chair weight

117 kg

Altezza max/min

della seduta (da terra)

Seat max/min height

(from the ground)

1040 ÷ 555 mm



Trendelenburg : -10°


(disponibile sulle versioni a 2/3/ 4 motori elettrici)

Trendelenburg: -10°

(available on versions with 2/3/4 electric motors)



A.	790÷1540 mm
B.	560÷580 mm
C.	980÷1620 mm
D.	710÷1390 mm
E.	540÷1010 mm
F.	1440 mm

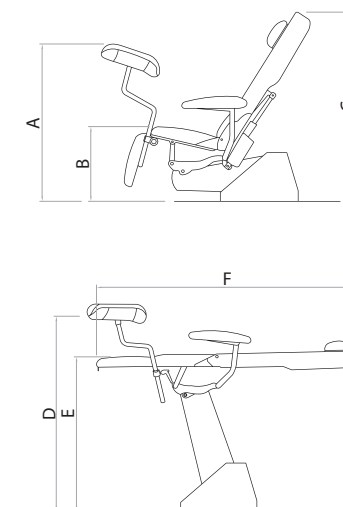

ACCESSORI_OPTIONALS

E05

Porta carta mono uso
Paper roll holder

IV07

Coppia cosciali imbottiti
Pair of padded thigh-holders

EL07

Basamento in acciaio verniciato con ruote
Glazed steel basement with wheels

E16

Supporto reggicosce snodabili con blocco movimenti
Thigh holder support with joint with locking device

EP06

Astaportaflebo 2 ganci
I.V. Stand with 2 hooks – Drip holder stand

E04

Poggiatesta ad altezza regolabile
Adjustable height headrest

BCR

Basamento in cristallo trasparente,
spessore 19 mm
Transparent crystal glass basement,
19 mm thickness

E29

Basamento cromato
Chrome basement

IV02

Reggitalloni telescopici
Telescopic heel-rest

E30 - STANDARD

Basamento verniciato
Glazed basement

IV10

Reggitalloni telescopici modello RING
Telescopic heel-rest

IV04

Supporto colposcopio solidale con la seduta della poltrona
Colposcopic support integrated to the chair seat

12500010

Funzione Memory Position:**permette la memorizzazione di 4 posizioni**

- 2 preimpostate dalla casa: CPR e posizione iniziale di visita (gestite da comando a pulsantiera)
- 2 posizioni di trattamento programmabili autonomamente dal medico (gestite da comando a pedale con tecnologia wireless)
Gestione movimentazioni elettriche tramite comando a pulsantiera e comando a pedale con tecnologia wireless.

**Memory Position Function:****it allows the memorization of 4 positions**

- 2 positions are preset by the firm: CPR and the initial position of the medical examination (they are managed by a push-button control)
- 2 positions are set freely by the doctor (a foot switch with wireless technology manages them)
The management of the electrical movements is organized through a foot switch with wireless technology

IVYY
IVY

Poltrona ginecologica/urologica - Gynaecological/urological chair

IVY è una poltrona per uso ginecologico/urologico. Poltrona ginecologica tradizionale dalle movimentazioni maneggevoli e funzionali per mantenere un comfort ottimale per il paziente. Numerose possibilità di regolazione in base al tipologia di configurazione del paziente. Unica nella fascia di mercato a cui si rivolge. Data la minima altezza da terra della seduta, presenta una facilità di utilizzo anche per la diagnostica di pazienti obesi e anziani. Struttura in acciaio di alta qualità verniciata con polvere epossidica con caratteristiche antimicrobiche. Supporto reggicosce in poliuretano integrale colore grigio a doppia regolazione su supporto cromato con forma ergonomica. Braccioli rotabili ed amovibili, seduta, schienale e gambale sono rivestiti in sky ignifugo classe 1IM, antibatterico, antimicotico, disinfettabile e resistente all'usura.

La dotazione standard comprende vaschetta di raccolta liquidi in acciaio inox, la pedaliera di comando per la gestione del sollevamento elettrico e il comando a pulsantiera (per le versioni 2/3/4 motori elettrici). Il basamento è fisso appoggiato sul pavimento e ricoperto con carter di protezione in abs.

IVY is an chair for gynecological and urological use. Traditional gynecological chair with handy and functional movements while maintaining optimal patient comfort. Numerous adjustment possibilities based on the type of patient configuration. Unique in the market segment to which it is aimed. With the minimum height from the ground of the seat, it is easy to use even for the diagnosis of obese and elderly patients. Structure in high quality steel completely painted with epoxy powder with antimicrobial characteristics. Support bracket in polyurethane foam with double adjustment on chromed support with ergonomic shape. Roll-away and removable armrests, seat, back and leg are upholstered in class 1 IM fireproof sky, antibacterial, antifungal, disinfectable and resistant to wear. The standard equipment includes a stainless steel liquid collection bowl, control pedal for electric lift management and a push button control (for versions with 2/3/4 electric motors). The base is fixed resting on the floor and covered with protective casing in abs.



E' disponibile in tre versioni: 1/2/3 motori elettrici a bassa tensione (24VDC) con movimentazione indipendente di sollevamento, schienale e gambale.

Il sollevamento è in tutte le versioni elettrico mentre le altre movimentazioni è possibile gestirle anche con molla a gas bloccabile nella posizione necessaria azionata manualmente.

I comandi elettrici sono gestiti da una pulsantiera e il solo comando di sollevamento è controllato anche tramite comando a pedale (sulla versione a 1 motore elettrico è presente solamente il comando a pedale).

Numerosi gli accessori disponibili per incrementare la funzionalità del prodotto (vedi lista accessori)



It is available in three versions: 1/2/3 low voltage electric motors (24V-DC) with independent lifting, back and leg rest movement.

The lifting is electric in all versions while the other movements can be managed even with a gas spring that can be locked in the required position manually operated. The electric controls are controlled by a push-button panel and only the lifting command is also controlled by foot control (on the version with 1 electric motor there is only the foot control).
(see accessories list).

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Tensione di alimentazione

Tension/Frequency

230V-50Hz

Motori bassa tensione

Low-voltage motors

24 V-DC

Capacità di sollevamento

Lifting capacity

180 Kg

Grado di protezione

Degree protection

IP54

Peso della poltrona

Chair weight

105 kg

Altezza max/min

della seduta (da terra)



Seat max/min height

(from the ground)

910 ÷ 540 mm



A.	160 mm
B.	380 mm
C.	580 mm
D.	690÷880 mm
E.	1080 mm
F.	540÷910 mm
G.	1650 mm
H.	910 mm

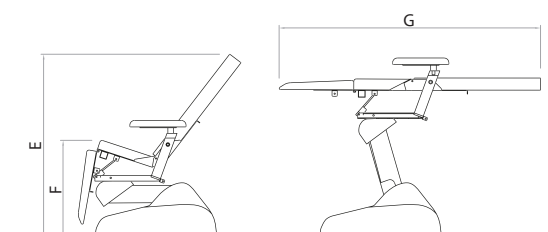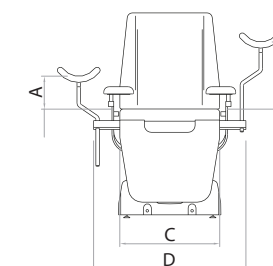

COMFORT



E05

Porta carta mono uso
Paper roll holder

IV07

Coppia cosciali imbottiti
Pair of padded thigh-holders

EP06

Astaportaflebo 2 ganci
I.V. Stand with 2 hooks – Drip holder
stand

E16

Supporto reggicosce snodabili con blocco movimenti
Thigh holder support with joint with locking device

IV02

Reggitalloni telescopici
Telescopic heel-rest

E04

Poggiatesta ad altezza regolabile
Adjustable height headrest

IV10

Reggitalloni telescopici modello RING
Telescopic heel-rest

IV04

Supporto colposcopio solidale con la seduta della poltrona
Colposcopic support integrated to the chair seat

CARTELLA COLORI - COLOURS CHART

6	1898	1831	V001	1900	V002	1897
872	833	1816	55	64	41	508
1529	680	667	1560	569	5947	5948
4947	8053	5946	1915	1944	1899	8051
8052	8061	1946	4933	991	477	1451
1459	1270	392	456	393	A46	1564
2244	1120	2166	430	6986	2243	151
1164	1200	4008	6985	7062	1984	

HAPPY METAL

1166 METAL	10 METAL	1925 METAL
------------	----------	------------

Tappezzeria realizzata rigorosamente con l'utilizzo di materiale con caratteristiche antibatteriche ed antimicotiche; materiale ignifugo e con alta resistenza all'abrasione.

Upholstery made strictly with the use of materials with antibacterial and antimycotic properties; fireproof material and with high abrasion resistance

12500010

Funzione Memory Position:**permette la memorizzazione di 4 posizioni**

- 2 preimpostate dalla casa: CPR e posizione iniziale di visita (gestite da comando a pulsantiera)
- 2 posizioni di trattamento programmabili autonomamente dal medico (gestite da comando a pedale con tecnologia wireless)
Gestione movimentazioni elettriche tramite comando a pulsantiera e comando a pedale con tecnologia wireless.

**Memory Position Function:****it allows the memorization of 4 positions**

- 2 positions are preset by the firm: CPR and the initial position of the medical examination (they are managed by a push-button control)
- 2 positions are set freely by the doctor (a foot switch with wireless technology manages them)
The management of the electrical movements is organized through a foot switch with wireless technology

7/TT Med®

Il costruttore potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo catalogo, per ragioni di natura tecnica o commerciale. Le illustrazioni non mostrano necessariamente il prodotto in versione standard.
The manufacturer can modify at any time the models described in this catalogue for technical or commercial reasons. The pictures don't necessarily show the product in the standard version.



7/TT Med®



Via Colombara, snc - 61041 Acqualagna (PU) - Italy
Piva 02589090410 - Tel. e Fax: +39 0721 797301 r.a.
info@ttmed.it - www.ttmed.it